

User Manual

Model: DM12


Contents

10.1-inch Digital Microscope (EN).....	01
10,1-Zoll-Digitalmikroskop (DE).....	07
Microscope numérique de 10,1 pouces (FR).....	13
Microscopio digitale da 10,1 pollici (IT).....	19
Microscopio digital de 10,1 pulgadas (ES).....	25
10.1インチデジタルマイクロスコープ (JA).....	31
10,1-tommers digital mikroskop (DA).....	37
10,1-tums digital mikroskop (SE).....	43
Digitální mikroskop 10,1 palců (CZ).....	49



- [DE] Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf detaillierte Anweisungen in Ihrer/Ihren bevorzugten Sprache(n) zuzugreifen.
- [DA] Scan QR-koden for at få adgang til detaljerede instruktioner på dit/dine foretrukne sprog.
- [EN] Please scan the QR code to access detailed instructions provided in your preferred language(s).
- [FR] Veuillez scanner le code QR pour accéder à des instructions détaillées dans la langue de votre choix.
- [IT] Scansiona il codice QR per accedere a istruzioni dettagliate fornite nella lingua che preferisci.
- [ES] Escanee el código QR para acceder a las instrucciones detalladas que se proporcionan en su(s) idioma(s) preferido(s).
- [CS] Naskenování QR kódu získáte přístup k podrobným pokynům ve vámi preferovaném jazyce (jazycích).
- [NL] Scan de QR-code voor gedetailleerde instructies in de taal/talen van uw voorkeur.
- [SV] Skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på ditt/dina språk.
- [EL] Σκάνηστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στην προτιμώμενη γλώσσα.
- [PL] Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji w preferowanym języku (językach).
- [HU] Kérjük, olvassd be a QR-kódot, hogy hozzáférj a kívánt nyelven (nyelveken) megadott részletes utasításokhoz.
- [PT] Digitalize o código QR para aceder às instruções detalhadas fornecidas no(s) seu(s) idioma(s) preferido(s).
- [BG] Моля, сканирайте QR кода за достъп до подробни инструкции, предоставени на предпочитания(те) от Вас език/езици.
- [HR] Skenirajte QR kod za pristup detaljnim uputama koje su navedene na vašem željenom jeziku.
- [ET] Eelistatud keeles (keeltes) esitatud üksikasjalike juhiste saamiseks skanni QR-kood.
- [FI] Skannaa QR-koodi, jotta saat käyttöösi yksityiskohtaiset ohjeet haluamallasi kielellä.
- [LV] Lūdzu, noskenējiet QR kodu, lai piekļūtu detalizētiem norādījumiem Jūsu izvēlētajā valodā(-s).
- [LT] Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte išsamias instrukcijas pasirinkta kalba.
- [RO] Vă rugăm scanați codul QR pentru a accesa instrucțiunile detaliate furnizate în limba (limbile) aleasă(alese).
- [SK] Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k podrobným pokynom uvedeným vo vami preferovanom jazyku (jazykoch).
- [SL] Skenirajte kodo QR za dostop do podrobnih navodil, ki so na voljo v vašem zelenem jeziku.
- [NB] Skann QR-koden for å få tilgang til detaljerte instruksjoner på ditt foretrukne språk.
- [IS] Vinsamlegast skannaðu QR-kóðann til að nálgast ítarlegar leiðbeiningar á því tungumáli eða tungumálum sem þú kýst.


Microscope installation

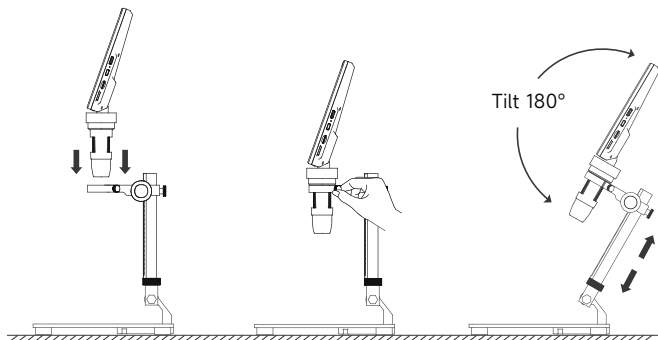

Step 1: Place the screen


Step 2: Tighten the two knobs

Light shield installation

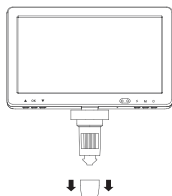

Step1:

Remove the lens cap

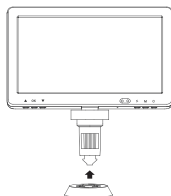

Step2:

Replace the light shield




Step3: When installing, rotate left and right so that the buckle is completely stuck.



Product Description

Parts and functions

Notice: The picture is for reference only, please refer to the actual object

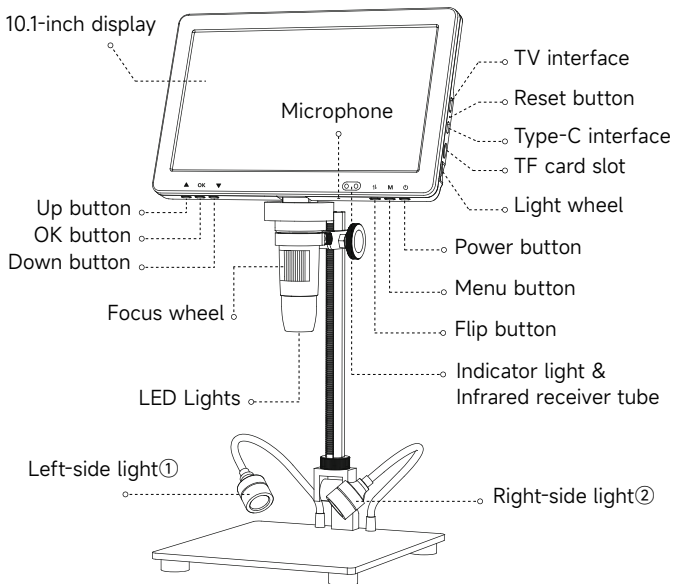

Turn on auxiliary lights

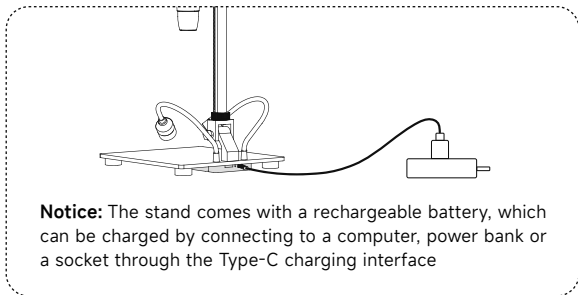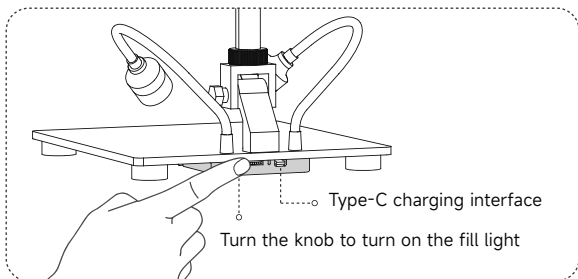

Work with PC


Software download

Note: The following 3 methods can be downloaded, please choose the appropriate version according to your computer system.

- ① Please download the applicable software from the following website: **<http://soft.hvscam.com>**
(Suitable for: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 and Mac)
- ② For Windows, search for “HiView” in “Microsoft Store”(“”)
(Suitable for: Windows 8, Windows 10, Windows 11 and above), and you can also be viewed in Camera(“”).
- ③ For Mac OS x 12 or above, search for “HiView” in “App Store”, and you can also be viewed in Photo Booth(“”)

Operating steps

Step 1. Connect the microscope to the computer via Type-C cable.

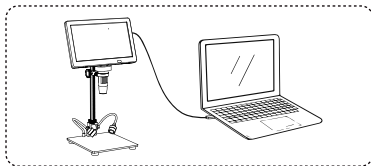


Step 2. Long press the microscope power button to turn on, and the computer side of the successful connection screen pop-up window: Mass Storage/PC Camera/Charge Mode three modes, please select the "PC Camera" mode.

Step 3. Run Hiview, you can watch the image, at this time the photo/video files will be automatically saved in the computer disk. (Note: When connecting to a computer to watch images, please make sure you are using a cable with data transfer function)

Function Introduction of USB Mode

When the device is connected to the computer through Type-C cable, the device can be used in Mass Storage / PC Camera / Charge mode.

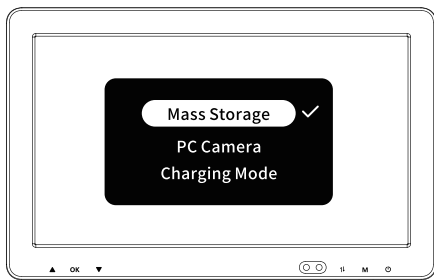

①**Mass Storage:** Enter the microscope memory from the computer side, you can view and process the current picture and video files in the TF card, at this time the microscope only Power button and Light wheel available.


②**PC Camera:** After selecting this mode, you can get a larger magnification of the image through the computer camera software, at this time the microscope only Power button and Light wheel available.

③**Charge Mode:** When the microscope is low on power, you can use the microscope while charging, use Type-C data cable to connect the microscope and the computer side, the microscope is turned on, select Charge Mode, you can enter the charging state. (Note: you can also use daily cell phone charger, computer, rechargeable battery to charge the microscope)

Work with TV


Operating steps

Step 1. Connect this microscope to the TV via HDTV cable

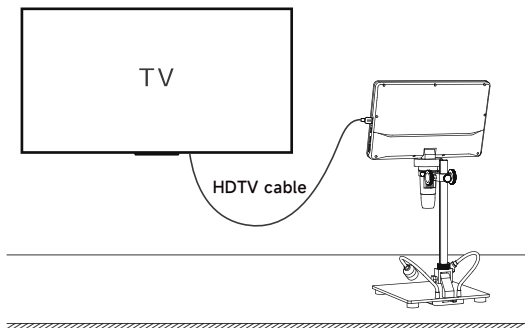


Step 2. Turn on the microscope and the image will appear on the display. At this time, microscope button and remote control button can be operated; when operating photo / video, the file will be automatically saved in TF card.

Installation des Mikroskops

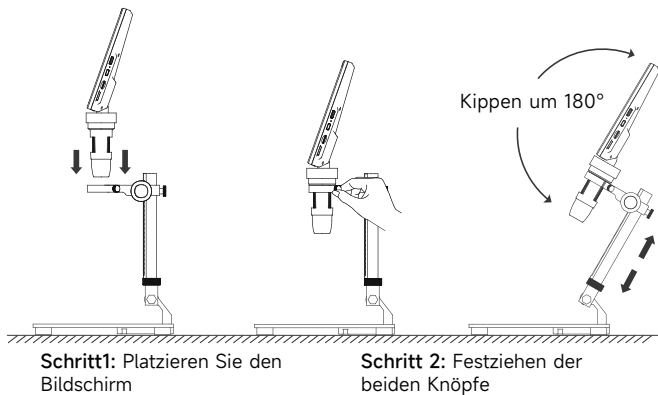


Installation des Lichtschutzes

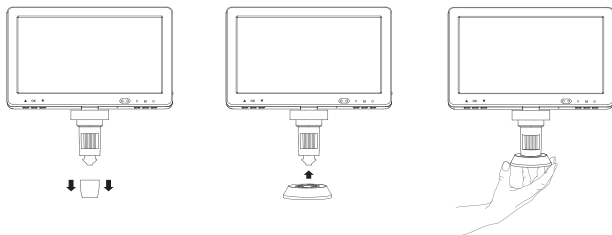


Beschreibung des Produkts

Teile und Funktionen

Hinweis: Das Bild ist nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt

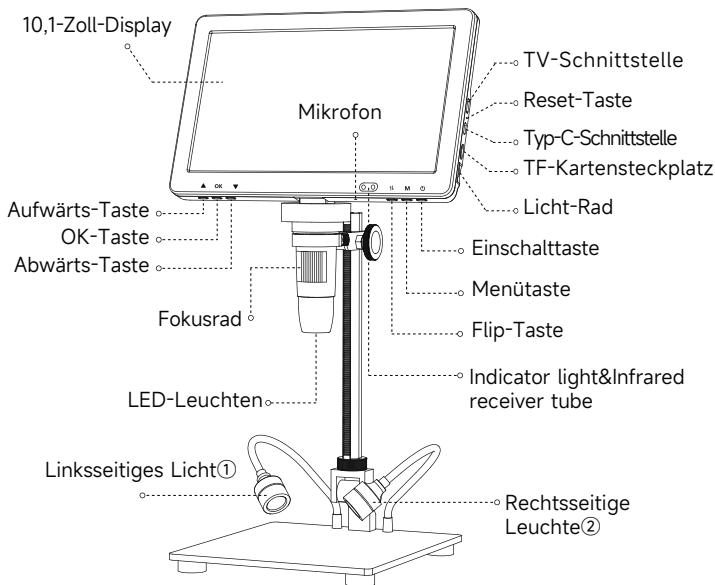


Einschalten der Zusatzbeleuchtung

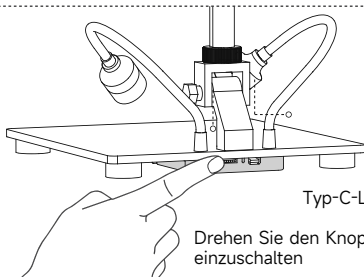

Typ-C-Ladeschnittstelle

Drehen Sie den Knopf, um das Zusatzlicht einzuschalten

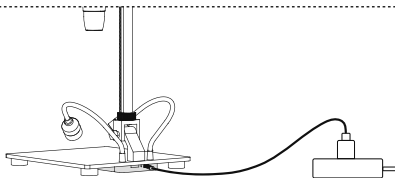

Hinweis: Das Stativ wird mit einem wiederaufladbaren Akku geliefert, der über die Typ-C-Ladeschnittstelle an einem Computer, einer Powerbank oder einer Steckdose aufgeladen werden kann.

Arbeiten mit PC

Herunterladen der Software

Hinweis: Die folgenden 3 Methoden können heruntergeladen werden, bitte wählen Sie die entsprechende Version für Ihr Computersystem.

① Bitte laden Sie die entsprechende Software von der folgenden Website herunter: **<http://soft.hvscam.com>**


(Geeignet für: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 und Mac)

② Für Windows, suchen Sie nach "HiView" im "Microsoft Store" ("📱") **(Geeignet für:** Windows 8, Windows 10, Windows 11 und höher), und Sie können auch in Camera ("📷") angezeigt werden.

③ Für Mac OS x 12 oder höher, suchen Sie nach "HiView" im "App Store", und Sie können auch in Photo Booth ("📷") angezeigt werden.

Bedienschritte

Schritt 1: Schließen Sie das Mikroskop über das Typ-C-Kabel an den Computer an.

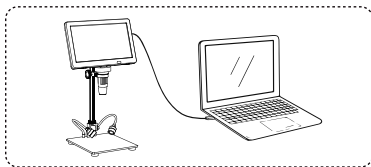

Schritt 2: Drücken Sie lange auf den Netzschalter des Mikroskops, um es einzuschalten.


Computer-Seite der erfolgreichen Verbindung Bildschirm

Pop-up-Fenster: Massenspeicher/PC-Kamera/Charge Mode, bitte wählen Sie den Modus "PC-Kamera".

Schritt 3: Starten Sie Hiview, um das Bild zu betrachten. Zu diesem Zeitpunkt werden die Foto-/Videodateien automatisch auf der Festplatte des Computers gespeichert. (Hinweis: Wenn Sie die Kamera zum Betrachten der Bilder an einen Computer anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ein Kabel mit Datenübertragungsfunktion verwenden)

Funktionseinführung des USB-Modus

Wenn das Gerät über ein Typ-C-Kabel mit dem Computer verbunden ist, kann das Gerät im Massenspeicher, PC-Kamera und Charge Mode verwendet werden.

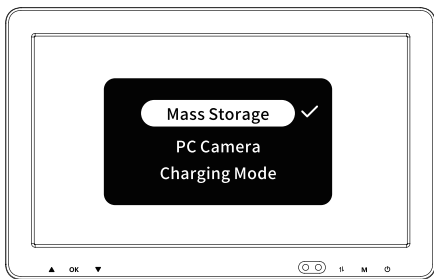

①**Massenspeicher:** Betreten Sie den Mikroskopspeicher von der Computerseite aus, können Sie die aktuellen Bild- und Videodateien auf der TF-Karte anzeigen und bearbeiten, zu diesem Zeitpunkt sind am Mikroskop nur die Power-Taste und das Lichtrad verfügbar.


②**PC-Kamera:** Nach der Auswahl dieses Modus können Sie eine größere Vergrößerung des Bildes durch die Computer-Kamera-Software zu erhalten, zu diesem Zeitpunkt das Mikroskop nur Power-Taste und Licht-Rad zur Verfügung.

③**Charge Mode:** Wenn das Mikroskop wenig Strom hat, können Sie das Mikroskop während des Aufladens verwenden, verwenden Sie Typ-C-Datenkabel, um das Mikroskop und die Computerseite zu verbinden, das Mikroskop wird eingeschaltet, wählen Sie den Lademodus, Sie können den Ladezustand eingeben. (Hinweis: Sie können auch täglich Handy-Ladegerät, Computer, Akku verwenden, um das Mikroskop zu laden)

Arbeiten mit TV


Bedienschritte

Schritt 1. Schließen Sie das Mikroskop über ein HDTV-Kabel an das Fernsehgerät an.

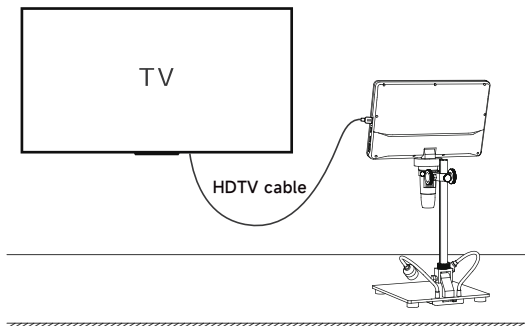


Schritt 2. Schalten Sie das Mikroskop ein, und das Bild wird auf dem Display angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt können die Mikroskoptaste und die Fernbedienungstaste bedient werden; bei der Bedienung von Foto/Video wird die Datei automatisch auf der TF-Karte gespeichert.

Installation du microscope

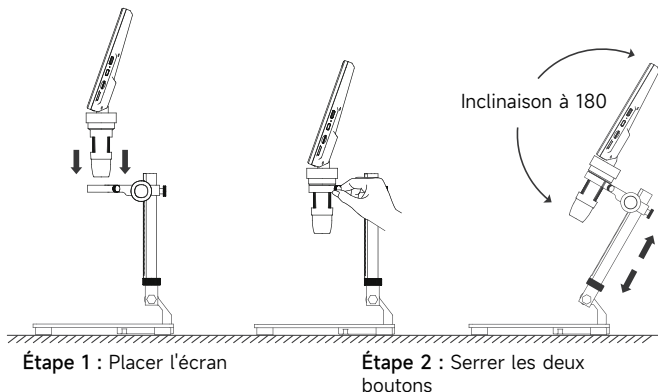


Installation du bouclier lumineux

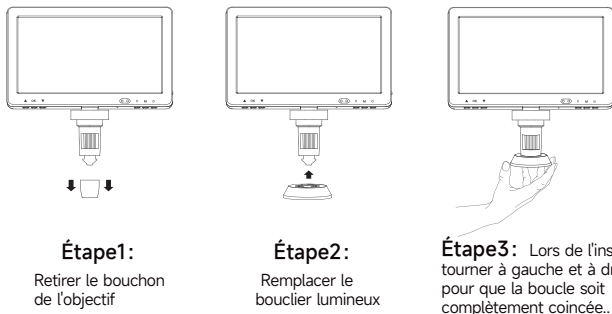


Description du produit

Pièces et fonctions

Remarque : L'image est fournie à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel.

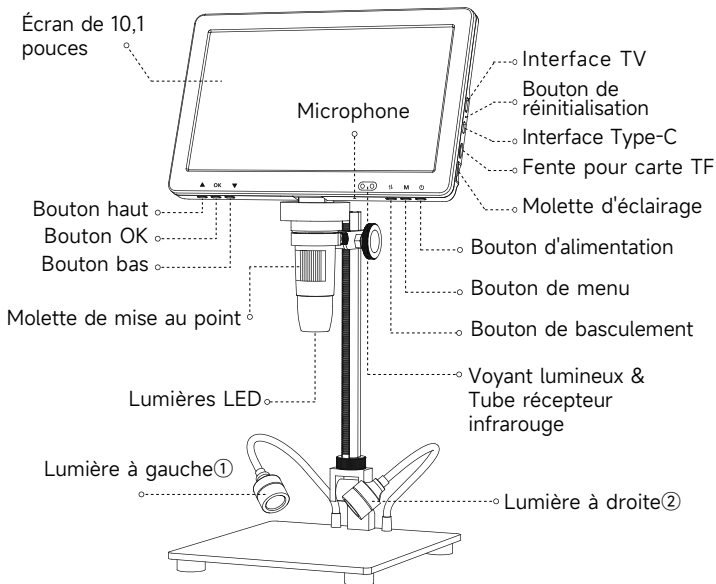


Allumer les lumières auxiliaires

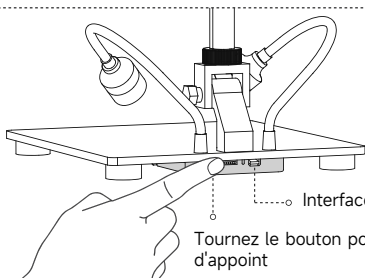

Interface de charge de type C

Tournez le bouton pour allumer la lumière d'appoint

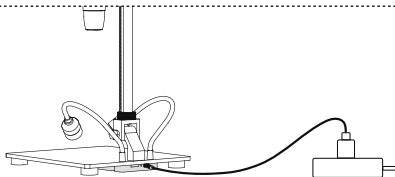

Remarque : le support est livré avec une batterie rechargeable, qui peut être chargée en la connectant à un ordinateur, à une banque d'alimentation ou à une prise de courant via l'interface de charge de type C.

Travailler avec un PC

Téléchargement du logiciel

Note : Les 3 méthodes suivantes peuvent être téléchargées, veuillez choisir la version appropriée en fonction de votre système informatique.

① Veuillez télécharger le logiciel approprié à partir du site web suivant **<http://soft.hvscam.com>**

(Suitable for : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 et Mac)


② Pour Windows, recherchez « HiView » dans « Microsoft Store » («  »)

(Convient à : Windows 8, Windows 10, Windows 11 et plus), et vous pouvez également être visualisé dans Camera(«  »).

③ Pour Mac OS x 12 ou supérieur, recherchez « HiView » dans « App Store », et vous pouvez également être visualisé dans Photo Booth («  ») .

Étapes de fonctionnement

Étape 1. Connectez le microscope à l'ordinateur via le câble Type-C.

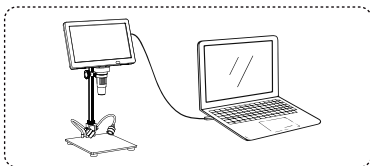


Étape 2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du microscope pour l'allumer.

côté ordinateur de la fenêtre pop-up de l'écran de connexion réussie : Mémoire de masse/Caméra PC/Charge Mode trois modes, veuillez sélectionner le mode « Caméra PC ».

Étape 3: Lancez Hiview, vous pouvez regarder l'image, à ce moment les fichiers photo/vidéo seront automatiquement enregistrés sur le disque de l'ordinateur. (Note : Lorsque vous vous connectez à un ordinateur pour regarder des images, assurez-vous que vous utilisez un câble avec une fonction de transfert de données).

Introduction à la fonction du mode USB

Lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur via le câble Type-C, l'appareil peut être utilisé en mode Mémoire de masse/ Caméra PC / Charge Mode.

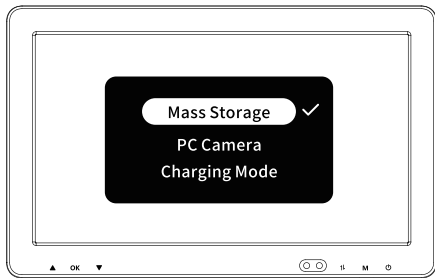

①**Mémoire de masse:** Entrez dans la mémoire du microscope du côté de l'ordinateur, vous pouvez voir et traiter les fichiers image et vidéo actuels dans la carte TF, à ce moment-là, le microscope seulement le bouton d'alimentation et la roue de lumière disponible.


②**Caméra PC:** Après avoir sélectionné ce mode, vous pouvez obtenir un agrandissement plus important de l'image par le biais du logiciel de l'appareil photo de l'ordinateur ; à ce moment-là, le microscope ne dispose que du bouton d'alimentation et de la molette d'éclairage.

③Charge Mode: Lorsque le microscope est faible en puissance, vous pouvez utiliser le microscope tout en chargeant, utiliser le câble de données Type-C pour connecter le microscope et le côté de l'ordinateur, le microscope est allumé, sélectionnez le mode de charge, vous pouvez entrer dans l'état de charge. (Remarque : vous pouvez également utiliser un chargeur de téléphone portable, un ordinateur ou une batterie rechargeable pour charger le microscope).

Travailler avec un téléviseur


Étapes de fonctionnement

Étape 1. Connectez ce microscope au téléviseur via un câble HDTV.

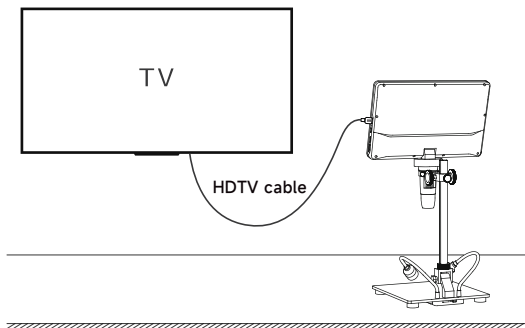


Etape 2. Allumez le microscope et l'image apparaîtra sur l'écran. A ce moment, le bouton du microscope et le bouton de la télécommande peuvent être utilisés ; lors de l'utilisation de la photo / vidéo, le fichier sera automatiquement sauvegardé sur la carte TF.


Installazione del microscopio

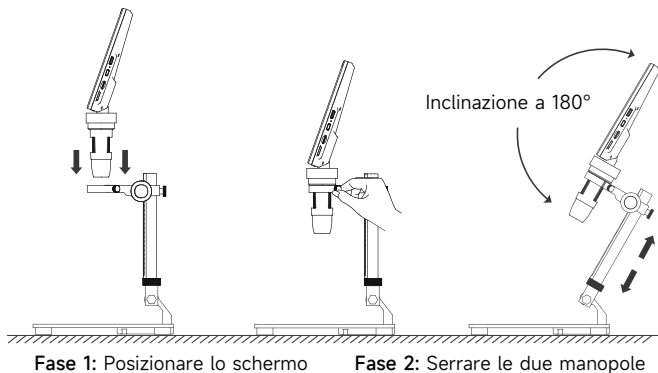


Installazione dello schermo luminoso

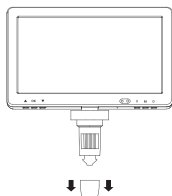

Fase1:
rimuovere il
copriobiettivo

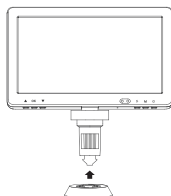

Fase2:
Sostituire lo schermo
luminoso

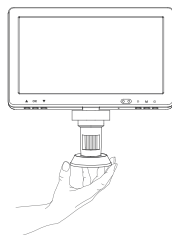


Fase3: Durante l'installazione,
ruotare a sinistra e a destra in
modo che la fibbia sia
completamente bloccata.


Descrizione del prodotto

Parti e funzioni

Avviso: L'immagine è solo per riferimento, si prega di fare riferimento all'oggetto reale

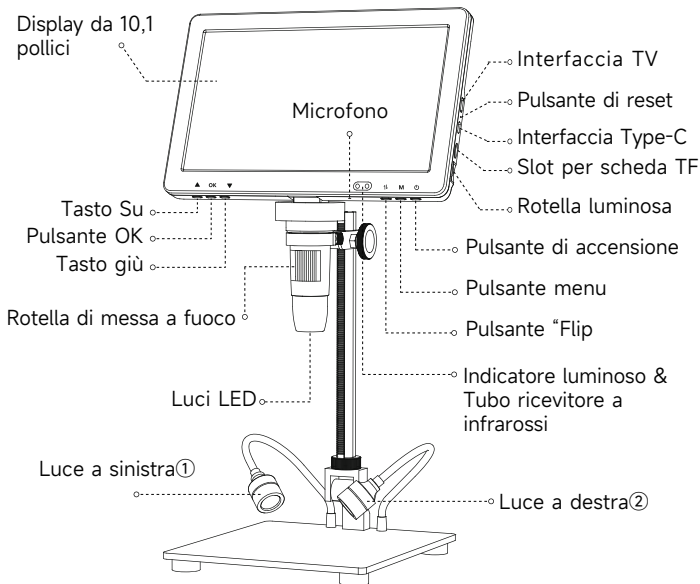


Accensione delle luci ausiliarie

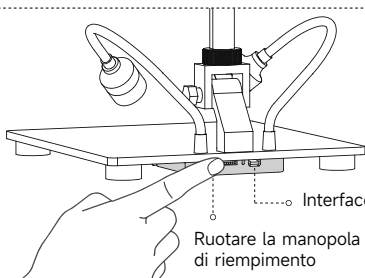

Interfaccia di ricarica Type-C

Ruotare la manopola per accendere la luce di riempimento

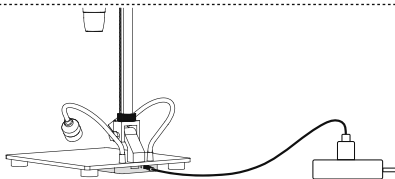

Nota: il supporto è dotato di una batteria ricaricabile, che può essere caricata collegandola a un computer, a un power bank o a una presa di corrente tramite l'interfaccia di ricarica Type-C.

Lavoro con il PC

Download del software

Nota: è possibile scaricare i seguenti 3 metodi, scegliendo la versione appropriata in base al proprio sistema informatico.

① Si prega di scaricare il software applicabile dal seguente sito web: **<http://soft.hvscam.com>**


(Adatto per: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 e Mac)

② Per Windows, cercare “HiView” in “Microsoft Store”(“”)
(adatto per: Windows 8, Windows 10, Windows 11 e successivi),
e può essere visualizzato anche in Camera(“”).

③ Per Mac OS x 12 o superiore, cercare “HiView” in “App Store”
e visualizzare anche Photo Booth (“”).

Fasi operative

Fase 1. Collegare il microscopio al computer tramite il cavo Type-C.

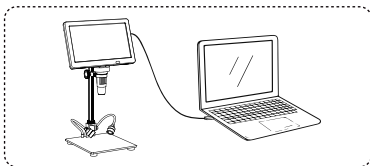


Fase 2. Premere a lungo il pulsante di accensione del microscopio per accenderlo.

lato computer della finestra pop-up della schermata di connessione riuscita: Memoria di massa/PC Camera/Charge Mode tre modalità, selezionare la modalità “PC Camera”.

Fase 3. Eseguire Hiview, è possibile guardare l'immagine; a questo punto i file foto/video verranno automaticamente salvati sul disco del computer. (Nota: quando ci si collega a un computer per guardare le immagini, assicurarsi di utilizzare un cavo con funzione di trasferimento dati).

Introduzione alle funzioni della modalità USB

Quando il dispositivo è collegato al computer tramite il cavo Type-C, può essere utilizzato in modalità Memoria di massa/PC Camera/Charge Mode.

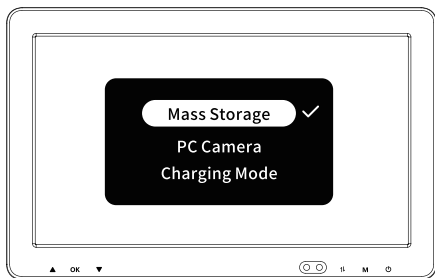

① **Memoria di massa:** Entrare nella memoria del microscopio dal lato del computer, è possibile visualizzare ed elaborare i file di immagini e video presenti nella scheda TF; in questo momento il microscopio dispone solo del pulsante di accensione e della rotella luminosa.


② **PC Camera:** Dopo aver selezionato questa modalità, è possibile ottenere un ingrandimento maggiore dell'immagine attraverso il software della fotocamera del computer; in questo momento sono disponibili solo il pulsante di accensione e la rotella luminosa del microscopio.

③ **Charge Mode:** Quando il microscopio è a corto di energia, è possibile utilizzarlo durante la ricarica; utilizzare il cavo dati Type-C per collegare il microscopio e il computer, accendere il microscopio, selezionare la modalità di ricarica e accedere allo stato di ricarica. (Nota: per caricare il microscopio è possibile utilizzare anche il caricabatterie del telefono cellulare, del computer o della batteria ricaricabile).

Lavorare con la TV


Fasi operative

Fase 1. Collegare il microscopio al televisore tramite un cavo HDTV.

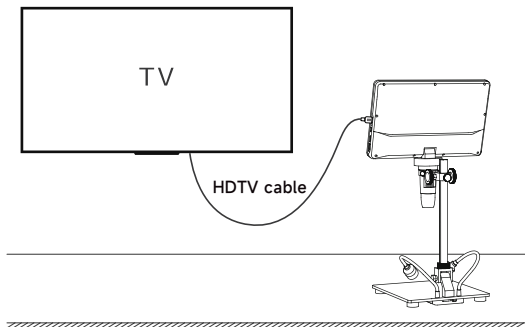

Fase 2. Accendere il microscopio e l'immagine apparirà sul display. A questo punto, è possibile azionare il pulsante del microscopio e il pulsante del telecomando; quando si utilizzano foto/video, il file viene salvato automaticamente nella scheda TF.


Instalación del microscopio

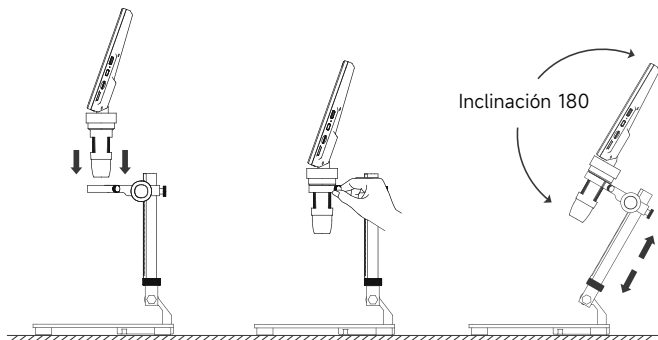

Paso1: Colocar la pantalla


Paso2: Apretar los dos pomos

Instalación del protector de luz

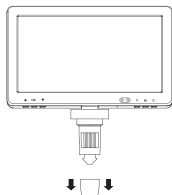


Paso1:

Retire la tapa del objetivo.

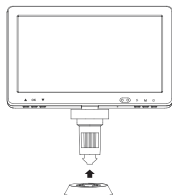

Paso2:

Vuelva a colocar el escudo de luz

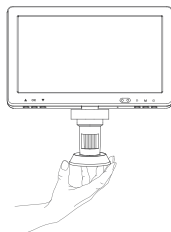


Paso3: Al instalarlo, gire a izquierda y derecha para que la hebilla quede completamente pegada.



Descripción del producto

Piezas y funciones

Nota: La imagen es sólo para referencia, por favor refiérase al objeto real

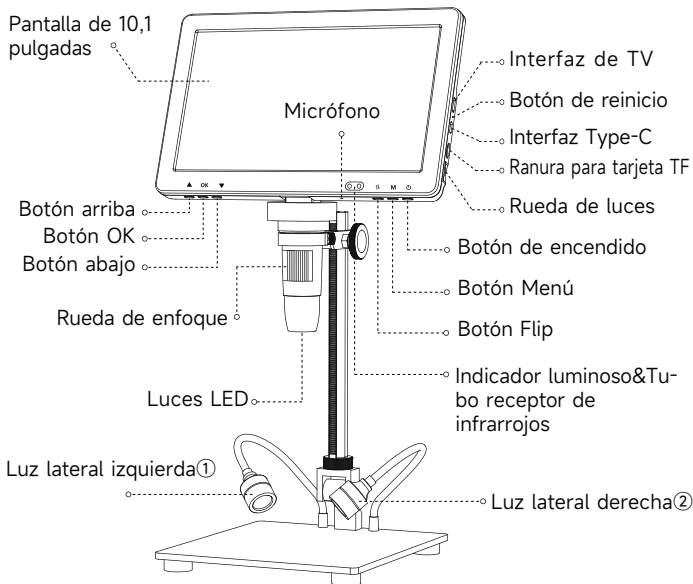

Encendido de las luces auxiliares

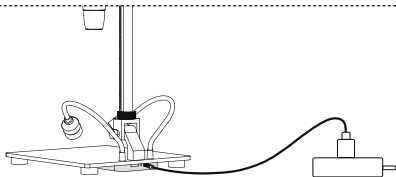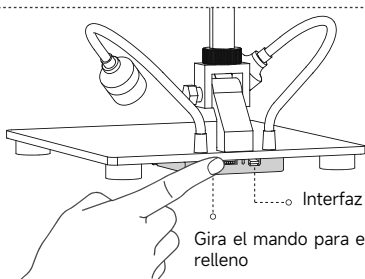

Aviso: El soporte incluye una batería recargable que se puede cargar conectándola a un ordenador, a un banco de alimentación o a un enchufe a través de la interfaz de carga de tipo C.

Trabajar con PC

Descarga de software

Nota: Los siguientes 3 métodos se pueden descargar, por favor elija la versión adecuada de acuerdo a su sistema informático.

① Por favor, descargue el software aplicable desde el siguiente sitio web: <http://soft.hvscam.com>


(Adecuado para: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 y Mac)

② Para Windows, busque «HiView» en «Microsoft Store» («»)
(Adecuado para: Windows 8, Windows 10, Windows 11 y superiores), y también se puede ver en Camera («»).

③ Para Mac OS x 12 o superior, busque «HiView» en «App Store», y también se puede ver en Photo Booth («»)

Pasos de funcionamiento

Paso 1. Conecte el microscopio a la computadora con un cable tipo C.

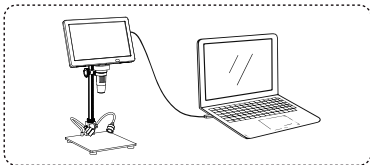


Paso 2. Mantenga presionado el botón de encendido del microscopio para encender y luego presione el botón de encendido. Conecte la pantalla en el lado de la computadora para pop-up con éxito: tres modos de Memoria de masa/Cámara PC/Charge Mode. Por favor, seleccione el modo "cámara PC".

Paso 3. Ejecute Hiview y puede ver la imagen. En este punto, el archivo de imagen/video se guardará automáticamente en el disco duro de la computadora. (nota: cuando usted conecta a la computadora para ver las imágenes, asegúrese de que usted está usando un cable con la función de transferencia de datos)

Introducción de la función del modo USB

Cuando el dispositivo está conectado al ordenador a través del cable Tipo-C, el dispositivo se puede utilizar en modo Memoria de masa/Cámara PC/Charge Mode.

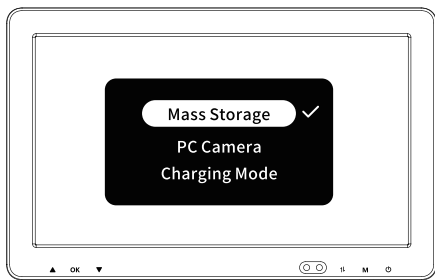

① **Memoria de masa:** Entrar en la memoria del microscopio desde el lado de la computadora, puede ver y procesar los archivos de imagen y vídeo actuales en la tarjeta TF, en este momento el microscopio sólo botón de encendido y la rueda de luz disponible.


② **Cámara PC:** Después de seleccionar este modo, puede obtener una mayor ampliación de la imagen a través del software de la cámara del ordenador, en este momento el microscopio sólo botón de encendido y la rueda de luz disponible.

③ **Charge Mode:** Cuando el microscopio está bajo de energía, puede utilizar el microscopio mientras se carga, utilice el cable de datos Tipo-C para conectar el microscopio y el lado de la computadora, el microscopio se enciende, seleccione Modo de carga, puede entrar en el estado de carga. (Nota: también puede utilizar el cargador diario de teléfono móvil, ordenador, batería recargable para cargar el microscopio)

Trabajar con TV


Pasos de funcionamiento

Paso 1. Conecte este microscopio al televisor mediante el cable HDTV

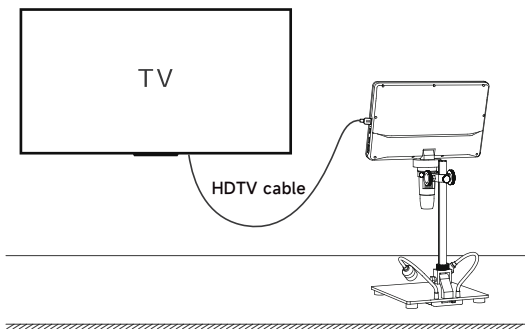

Paso 2. Encienda el microscopio y la imagen aparecerá en la pantalla. En este momento, el botón del microscopio y el botón del mando a distancia pueden ser operados; cuando se opera foto / vídeo, el archivo se guardará automáticamente en la tarjeta TF.


顕微鏡の取り付け

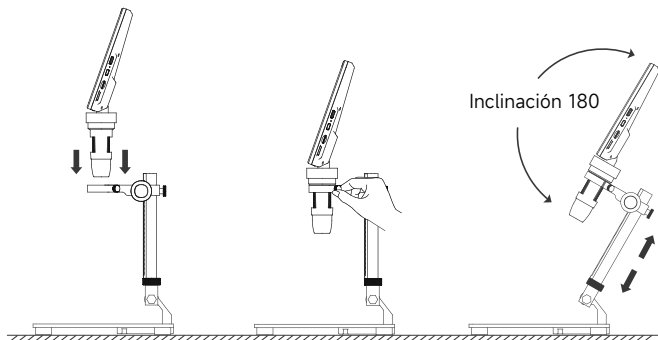

ステップ1: スクリーンを置く

ステップ2: つのノブを締める

ライトシールドの取り付け

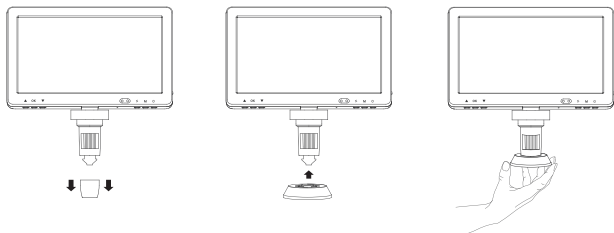

ステップ1:

レンズキャップを外す

ステップ2:


ライトシールドを交換する

ステップ3: 取り付けの際は、バックルが完全にはまるように左右に回転させてください。


製品説明

部品と機能

お知らせ 画像はイメージです。

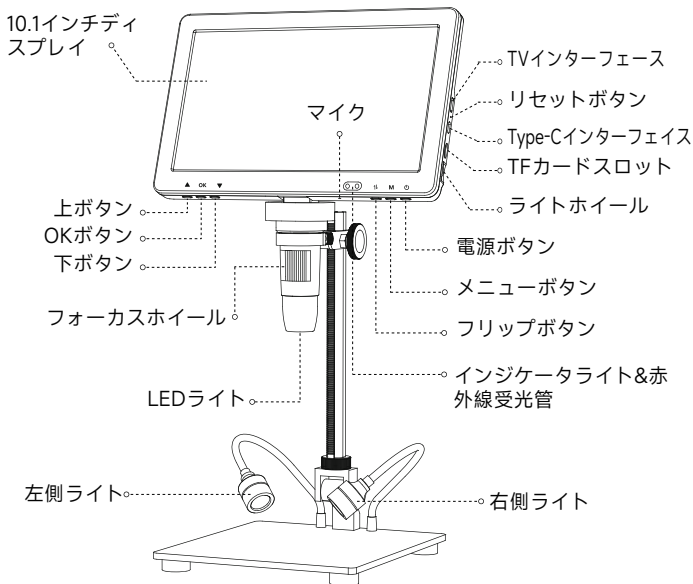


補助照明点灯

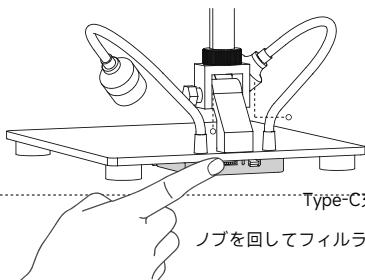

Type-C充電インターフェース

ノブを回してフィルライトを点灯させる

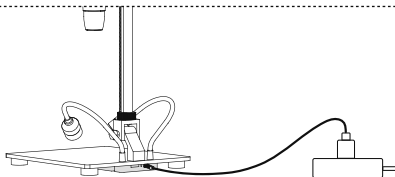

お知らせ： スタンドには充電式バッテリーが付属しており、Type-C充電インターフェースを介してコンピューターやパワーバンク、ソケットに接続して充電することができます。

PCとの連携

ソフトウェアのダウンロード

注：以下の3つの方法でダウンロードできますので、お使いのコンピュータシステムに応じて適切なバージョンを選択してください。

① <http://soft.hvscam.com> からダウンロードしてください。

(対応OS Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Mac に対応しています。)


② Windowsの場合は、「Microsoft Store」(「」)で「HiView」を検索してください。

(対応:Windows 8、Windows 10、Windows 11以上)、Camera(「」)でもご覧いただけます。

③ Mac OS x 12 以上の場合は、「App Store」で「HiView」を検索し、「Photo Booth」(「」)でもご覧いただけます。

操作手順

ステップ1. 顕微鏡をType-Cケーブルでパソコンに接続する。

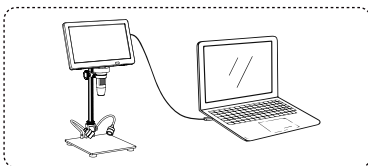


ステップ2. 顕微鏡の電源ボタンを長押しし、電源をオンにします。
成功した関係スクリーンのポップアップウィンドウのコンピュータ側面：
ディスク / PCカメラ / Charge Modeの3つのモードがありますが、「PCカメラ」モードを選択してください。

ステップ3. Hiviewを起動し、画像を見ることができます。この時、写真 / ビデオファイルは自動的にコンピュータディスクに保存されます。(注：パソコンに接続して画像を見る場合、データ転送機能付きケーブルを使用していることを確認してください。)

USBモードの機能紹介

デバイスをType-Cケーブルでコンピュータに接続すると、ディスク / PCカメラ / Charge Modeで使用することができます。

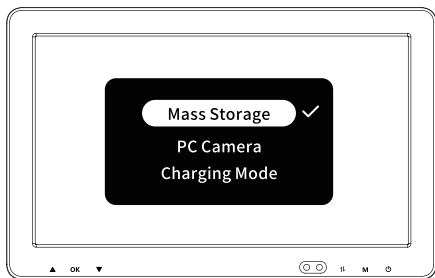

ディスク：コンピュータ側からマイクロスコープのメモリを入力し、メモリカード内の現在の画像とビデオファイルを表示して処理することができます。この時点では、マイクロスコープのみの電源ボタンとライトホイールが利用可能です。


PCカメラ： このモードを選択した後、コンピュータ カメラ ソフトウェアを通してイメージのより大きい拡大を得ることができます、この時点で利用できる顕微鏡電源ボタンおよびライト ホイールだけ。

Charge Mode: 顕微鏡が低い力のとき、満たす間顕微鏡を使用できません。顕微鏡およびコンピュータ側面を接続するのに Type-C データ ケーブルを使用して下さい、顕微鏡は、充满モードを選びます。充满状態に入ることができます。 (注: また顕微鏡を満たすのに毎日の携帯電話の充電器、コンピュータ、充電電池を使用できます)

TV との仕事


操作手順

ステップ 1. この顕微鏡を HDTV ケーブルによって TV に接続して下さい。

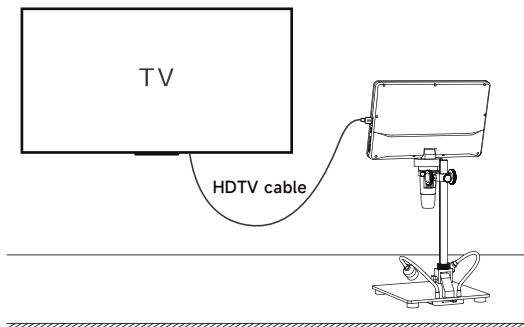

ステップ 2. 顕微鏡を始動させ、イメージは表示で現われる。この時点で、顕微鏡ボタンおよびリモート・コントロール ボタンは作動できます; 写真/ビデオを作動させるとき、ファイルは TF カードに自動的に救われます。


Mikroskopmontering

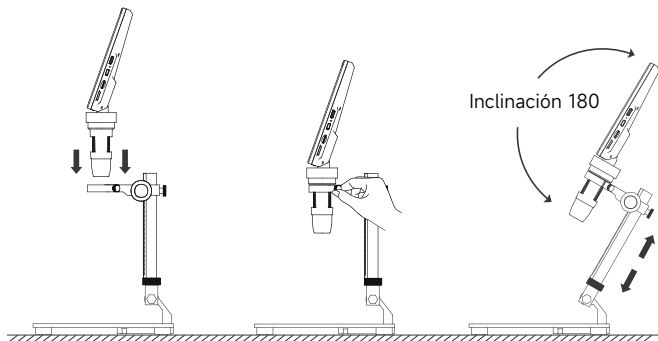

Trin 1: Placer skærmen

Trin 2: Stram de to knapper

Montering af lysafskærmning

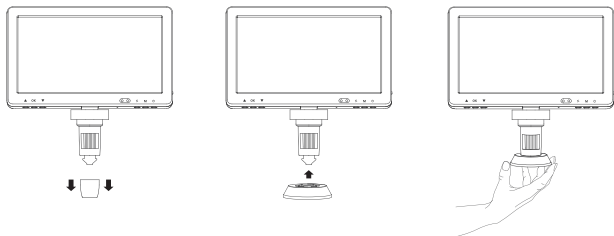

Trin 1: Fjern linsedækslet


Trin 2: Erstat med lysafskærmningen

Trin 3: Ved installation, drej venstre og højre så spænden er helt fast.


Produktbeskrivelse

Dele og funktioner

Bemærk: Billedet er kun vejledende, henvis venligst til den faktiske genstand

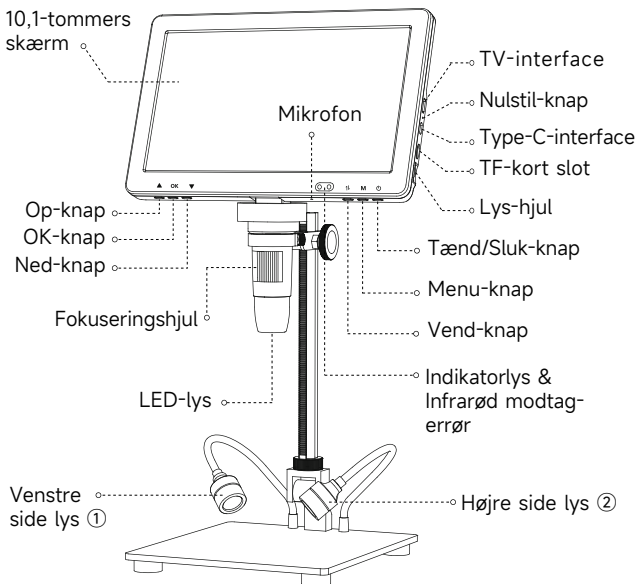


Tænd for auxiliær belysning

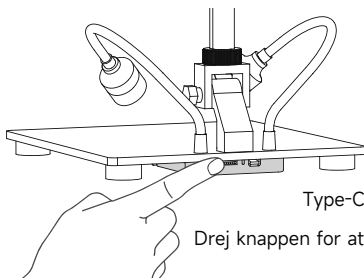

Type-C opladningsinterface

Drej knappen for at tænde for fyldelyset

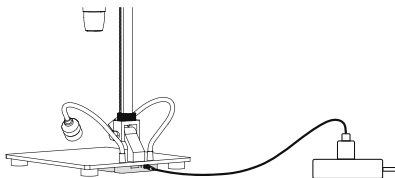

Bemærk: Stativet har et genopladeligt batteri, som kan oplades ved at tilslutte en computer, en power bank eller en stikkontakt via Type-C opladningsinterfacet

Arbejd med PC

Software download

Bemærk: Følgende 3 metoder kan downloades, vælg venligst den passende version i henhold til dit computersystem.

① Download den relevante software fra følgende hjemmeside:

<http://soft.hvscam.com>

(Egnet til: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 og Mac)


② For Windows, søg efter "HiView" i "Microsoft Store" ("H").

(Egnet til: Windows 8, Windows 10, Windows 11 og derover), og du kan også se det i Kamera ("K").

③ For Mac OS x 12 eller derover, søg efter "HiView" i "App Store", og du kan også se det i Photo Booth ("P").

Driftstrin

Trin 1. Tilslut mikroskopet til computeren via Type-C-kabel.

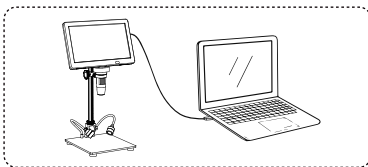


Trin 2. Langt tryk på mikroskopets tænd/sluk-knap for at tænde, og computerens succesfulde forbindelsesskærm viser en pop op-vindue: Mass Storage/PC Camera/Charge Mode tre tilstande, vælg venligst "PC Camera"-tilstanden.

Trin 3. Kør Hiview, du kan se billedet, på dette tidspunkt vil foto-/videofilerne automatisk blive gemt på computerens harddisk. (Bemærk: Når du tilslutter en computer for at se billeder, sørg for at du bruger et kabel med datatransmissionsfunktion)

Funktionsintroduktion af USB-tilstand

Når enheden er tilsluttet computeren via Type-C-kabel, kan enheden bruges i Mass Storage / PC Camera / Charge tilstand.

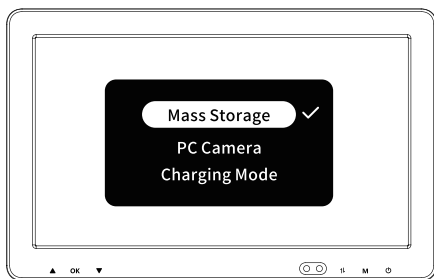

① **Mass Storage:** Gå ind i mikroskopets hukommelse fra computer-siden, du kan se og behandle de aktuelle billed- og videofiler i TF-kortet, på dette tidspunkt er kun Tænd/Sluk-knappen og Lys-hjulet tilgængelige på mikroskopet.


② **PC Camera:** Efter valg af denne tilstand kan du få en større forstørrelse af billedet gennem computerens kamerasoftware, på dette tidspunkt er kun Tænd/Sluk-knappen og Lys-hjulet tilgængelige på mikroskopet.

③**Charge Mode:** Når mikroskopet har lav batteriniveau, kan du bruge mikroskopet mens det oplades. Brug Type-C-datakabel til at forbinde mikroskopet og computersiden, tænd mikroskopet, vælg Charge Mode, så kan du indtaste opladningstilstand. (Bemærk: du kan også bruge almindelig mobiltelefonoplader, computer, genopladeligt batteri til at oplade mikroskopet)

Arbejd med TV


Driftstrin

Trin 1. Tilslut dette mikroskop til TV'et via HDTV-kabel

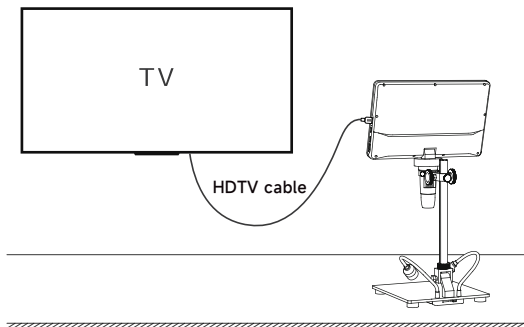

Trin 2. Tænd for mikroskopet og billedet vil vises på skærmen. På dette tidspunkt kan mikroskopknapper og fjernbetjeningsknapper betjenes; ved betjening af foto / video, vil filen automatisk blive gemt i TF-kortet.


Mikroskopmontering

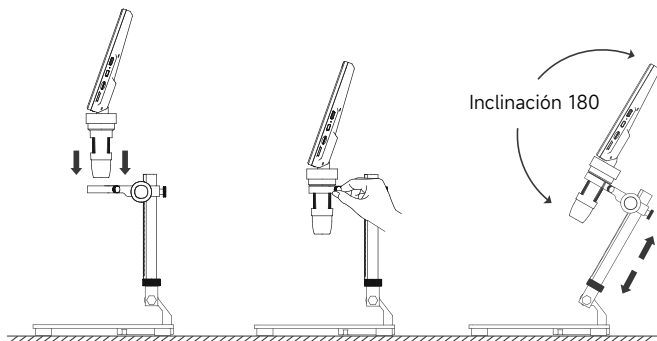


Steg 1: Placera skärmen

Steg 2: Dra åt de två vredarna


Montering av ljussköld

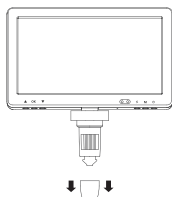

Steg 1: Ta bort linslocket

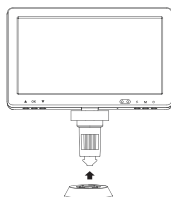

Steg 2: Sätt på ljusskölden

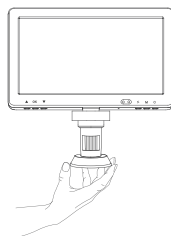


Steg 3: Vid installation, rotera vänster och höger så att spännet sitter helt fast.


Produktbeskrivning

Delar och funktioner

OBS: Bilden är endast avsedd för referens, se den faktiska produkten

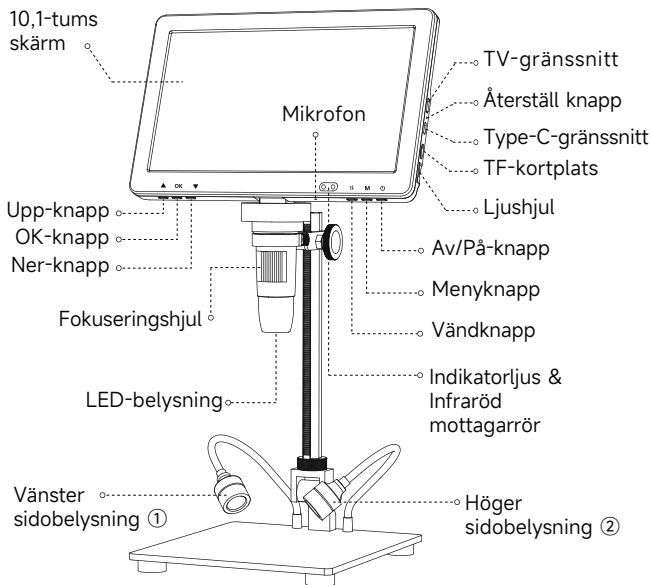


Sätt på extra belysning

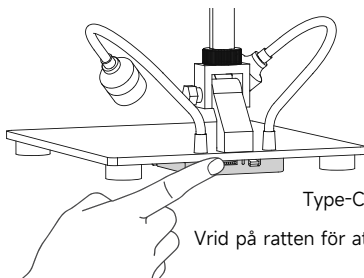

Type-C laddningsgränssnitt

Vrid på ratten för att sätta på fyllningsljuset

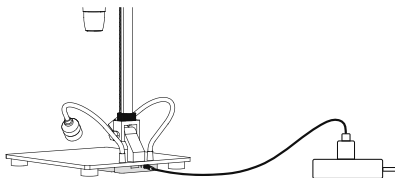

OBS: Stativet har ett uppladdningsbart batteri, som kan laddas genom att ansluta till en dator, ett power bank eller ett vägguttag via Type-C laddningsgränssnittet

Arbeta med PC


Nedladdning av programvara

OBS: Följande 3 metoder kan laddas ner, var god välj lämplig version enligt ditt datorsystem.

- ① Ladda ner den tillämpliga programvaran från följande webbplats:
<http://soft.hvscam.com>
(Lämplig för: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 och Mac)
- ② För Windows, sök efter "HiView" i "Microsoft Store" ("H"),
(Lämplig för: Windows 8, Windows 10, Windows 11 och senare),
och du kan också se det i Kamera ("K").
- ③ För Mac OS x 12 eller senare, sök efter "HiView" i "App Store",
och du kan också se det i Photo Booth ("P").

Driftssteg

Steg 1. Anslut mikroskopet till datorn via Type-C-kabel.

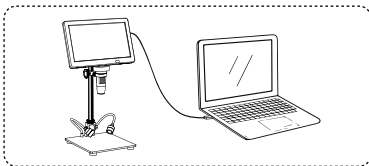


Steg 2. Håll länge inne mikroskopets av/på-knapp för att sätta på, och datorns sidas framgångsrika anslutningsskärm visar ett popup-fönster: Masslagring/PC-kamera/Laddningsläge tre lägen, var god välj "PC-kamera"-läget.

Steg 3. Kör Hiview, du kan titta på bilden, vid denna tidpunkt kommer foto-/videofilerna automatiskt att sparas på datorns hårddisk. (OBS: När du ansluter till en dator för att titta på bilder, se till att du använder en kabel med dataöverföringsfunktion)

Funktionsintroduktion för USB-läge

När enheten är ansluten till datorn via Type-C-kabel, kan enheten användas i Masslagring / PC-kamera / Laddningsläge.

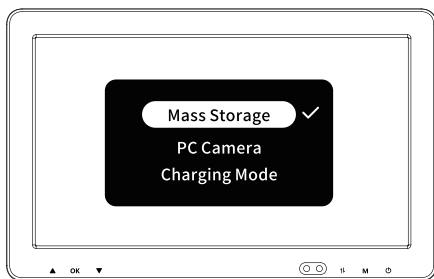

① **Masslagring:** Gå in i mikroskopets minne från datorns sida, du kan visa och bearbeta de aktuella bild- och videofilerna i TF-kortet, vid denna tidpunkt är endast Av/På-knappen och Ljushjulet tillgängliga på mikroskopet.


② **PC-kamera:** Efter att ha valt detta läge kan du få en större förstoring av bilden genom datorns kamerasoftware, vid denna tidpunkt är endast Av/På-knappen och Ljushjulet tillgängliga på mikroskopet.

③**Charge Mode:** När mikroskopets batteri är lågt kan du använda mikroskopet medan det laddas. Använd Type-C-datakabel för att ansluta mikroskopet och datorns sida, sätt på mikroskopet, välj Charge Mode, så kan du gå in i laddningstillstånd. (OBS: du kan också använda vanlig mobiltelefonladdare, dator, uppladdningsbart batteri för att ladda mikroskopet)

Arbeta med TV


Driftssteg

Steg 1. Anslut detta mikroskop till TV:n via HDTV-kabel

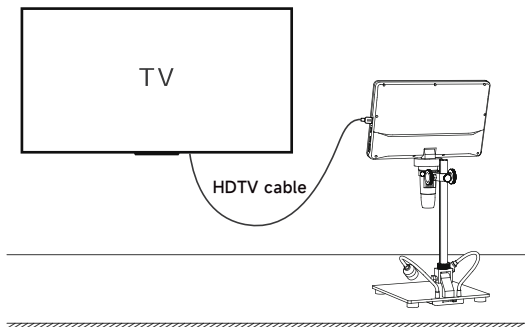

Steg 2. Sätt på mikroskopet och bilden kommer att visas på skärmen. Vid denna tidpunkt kan mikroskopknappar och fjärrkontrollsknappar opereras; vid operation av foto / video, kommer filen automatiskt att sparas i TF-kortet.


Montáž mikroskopu

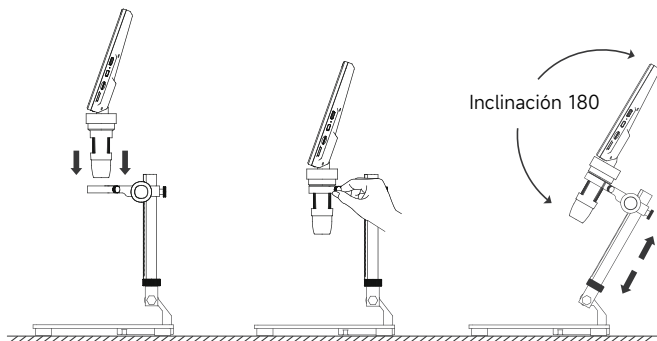


Krok 1: Umístěte obrazovku

Krok 2: Utáhněte dva knoflíky


Montáž stínítka osvětlení

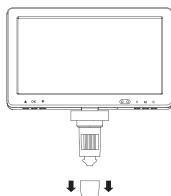

Krok 1: Sejměte kryt objektivu

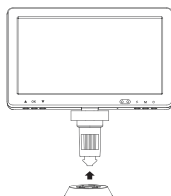

Krok 2: Vyměňte jej za stínítko osvětlení

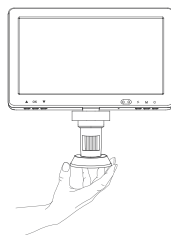


Krok 3: Při instalaci otáčejte doleva a doprava, aby západka zcela zapadla.


Popis produktu

Části a funkce

Poznámka: Obrázek je pouze pro referenční účely, řiďte se skutečným výrobkem

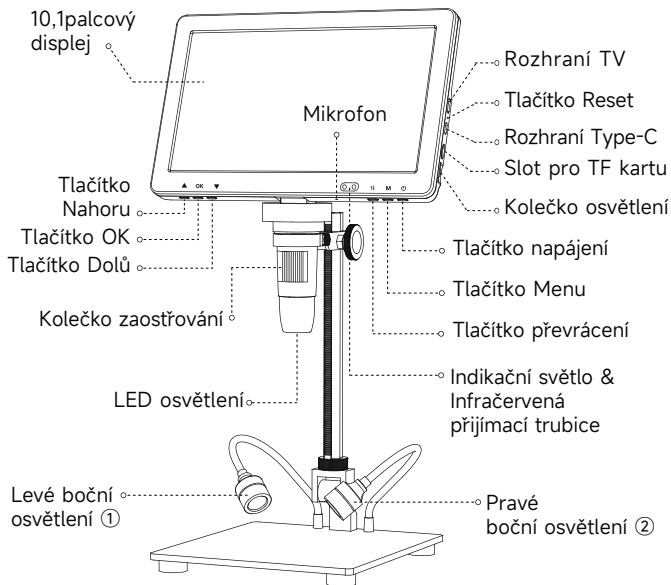


Zapnutí přídavného osvětlení

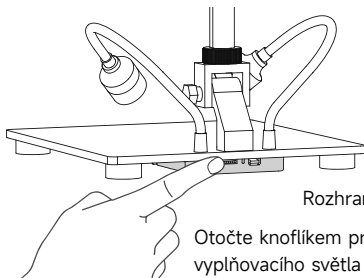

Rozhraní Type-C pro nabíjení

Otočte knoflíkem pro zapnutí
vyplňovacího světla

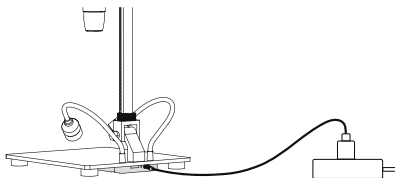

Poznámka: Stojan je vybaven dobíjecí baterií, kterou lze nabíjet připojením k počítači, power bance nebo zásuvce pomocí rozhraní Type-C pro nabíjení

Práce s PC

Stažení software

Poznámka: Následující 3 metody lze stáhnout, zvolte prosím vhodnou verzi podle vašeho počítačového systému.

① Stáhněte si příslušný software z následujícího webu:

<http://soft.hvscam.com>


(Vhodné pro: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 a Mac)

② Pro Windows, vyhledejte "HiView" v "Microsoft Store" ("H").
(Vhodné pro: Windows 8, Windows 10, Windows 11 a vyšší), a také jej můžete zobrazit v aplikaci Kamera ("K").

③ Pro Mac OS x 12 nebo vyšší, vyhledejte "HiView" v "App Store", a také jej můžete zobrazit v aplikaci Photo Booth ("P").

Postup práce

Krok 1. Připojte mikroskop k počítači pomocí kabelu Type-C.

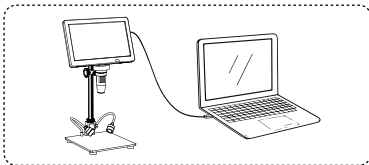


Krok 2. Dlouze stiskněte tlačítko napájení mikroskopu pro zapnutí, a na straně počítače se při úspěšném připojení objeví vyskakovací okno: Tři režimy Úložiště/PC kamera/Režim nabíjení, vyberte prosím režim "PC kamera".

Krok 3. Spustíte Hiview, můžete sledovat obraz, v tomto okamžiku se soubory foto/video automaticky uloží na disk počítače. (Poznámka: Při připojování k počítači pro sledování obrazů se ujistěte, že používáte kabel s funkcí přenosu dat)

Úvod do funkce režimu USB

Když je zařízení připojeno k počítači pomocí kabelu Type-C, zařízení lze použít v režimu Úložiště / PC kamera / Nabíjení.

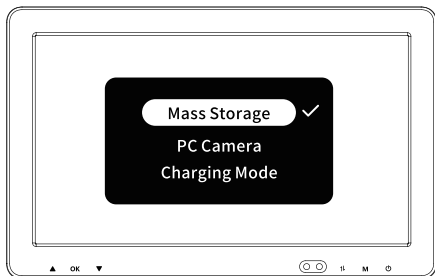

① **Úložiště:** Vstupte do paměti mikroskopu ze strany počítače, můžete zobrazit a zpracovat aktuální obrazové a video soubory na TF kartě, v tomto okamžiku jsou na mikroskopu k dispozici pouze tlačítko Napájení a kolečko Osvětlení.


② **PC kamera:** Po výběru tohoto režimu můžete získat obraz s větším zvětšením prostřednictvím softwaru kamery počítače, v tomto okamžiku jsou na mikroskopu k dispozici pouze tlačítko Napájení a kolečko Osvětlení.

③**Charge Mode:** Když je baterie mikroskopu vybitá, můžete mikroskop používat během nabíjení. Použijte Type-C datový kabel pro připojení mikroskopu a počítače, zapněte mikroskop, vyberte Charge Mode, a můžete přejít do stavu nabíjení. (Poznámka: mikroskop můžete nabíjet také pomocí běžné nabíječky mobilního telefonu, počítače nebo power banky)

Práce s TV

Postup práce

Krok 1. Připojte tento mikroskop k TV pomocí HDTV kabelu

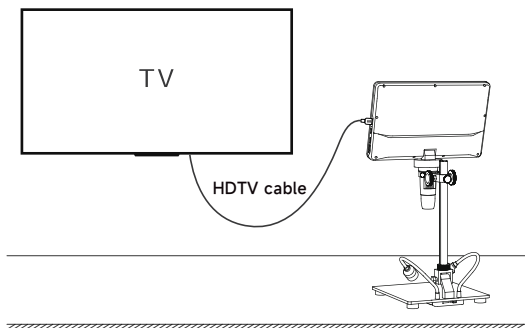

Krok 2. Zapněte mikroskop a obraz se objeví na displeji. V tomto okamžiku lze ovládat tlačítka mikroskopu a dálkového ovladače; při pořizování foto / video se soubor automaticky uloží na TF kartu.